




Dans les cas où les pinces bipolaires ne peuvent plus être utilisées, pour la coagulation bipolaire de zones à saignement diffus, par exemple dans le nez, une nouvelle génération d'électrodes a été développée qui permet au chirurgien avec un diamètre de tige de seulement deux mm de cautériser également les cavités les plus étroites de façon efficace et sûre.

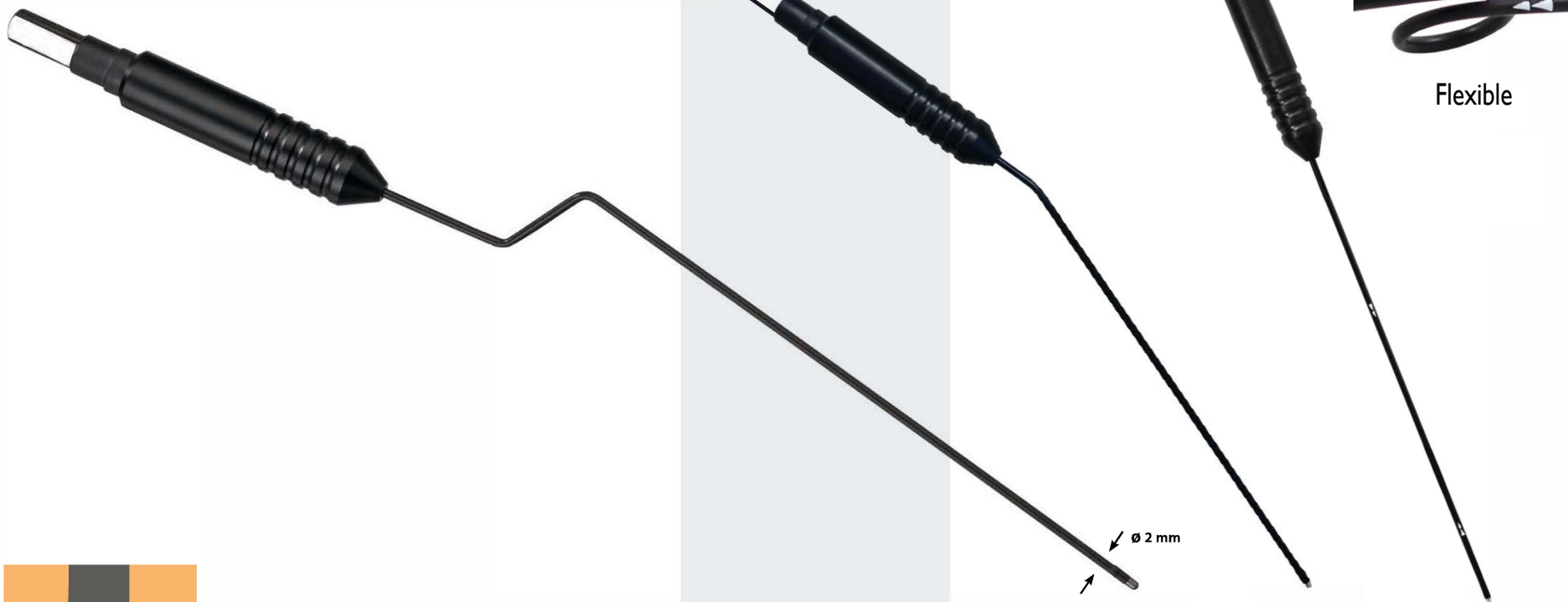


Flexible

Ø 2 mm



CORMEDICA SAS


Greenpark - Immeuble A1 - Rue Claude
Chappe 38300 Bourgoin-Jallieu
Tél : 04 74 94 34 43
E-mail : contact@cormedica.fr
www.cormedica.fr

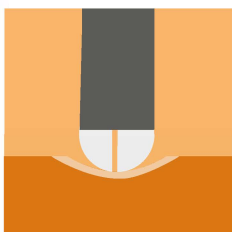

Les deux pôles électriques forment une « coupole divisée » au bout, de sorte que soit clairement définie une zone de coagulation d'un diamètre d'environ 2,5 mm et d'une profondeur d'environ 0,5 mm (schéma) quand le courant bipolaire de coagulation est activé.



Les électrodes de coagulation sont disponibles en version cou-dée et en forme de baïonnette.

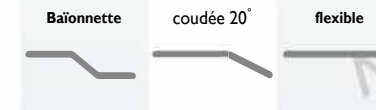

13 cm	85620410	85620420	
14 cm			85620430
18 cm			85620460
24 cm			85620450



Film