

## TRAITER AUSSI BIEN LES BRONCHES QUE LES ALVEOLES



GARANTIE 2 ANS

Compresseur pneumatique parmi les plus puissants, l'AC 2000, associé à son nébuliseur, permet une nébulisation rapide et de qualité.

Il est compatible avec tous les produits nébulisables\* sans ajout de liquide physiologique :

- Broncho-dilatateurs : Terbutaline, Salbutamol, Ipratropium
- Anti-inflammatoires : Budésonide, Beclométasone
- Antibiotiques : Tobramycine, Colistine
- Anti-infectieux : Pentamidine
- Fluidificateurs : Melaleuca viridiflora
- Vasodilatateurs : Ilprost
- Mucolytique : Dornase alpha

\* Source : GAT du SPLF - 2011

Robuste et simple d'utilisation, l'AC 2000 est idéal pour la location et une utilisation intensive.

Prise en charge de la location et du kit de nébulisation pour chaque patient : tubulure, capsule et masque.

### SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Poids : 2,8 kg Dimensions : 210 x 185 x 185 mm  
Consommation : 160 W

#### PERFORMANCES

MMAD : 2,90  $\mu$   
% de particules respirables < 5 $\mu$ m : 75%  
Débit : 7 L/min  
Pression en service : 1.38 bar  
Volume nébulisé : 0,35 ml / min  
Volume résiduel : < 0,9 ml

### Présentation du dispositif

Compresseur AC 2000 avec :


- bouton M/A
- filtre Entrée air
- filtre Sortie air pour connexion tubulure
- espace de rangement (câblage, kit de nébulisation)
- 3 kits inclus : buccal, enfant, adulte

Les kits de nébulisation comprennent une cuve de nébulisation graduée, une tubulure et, soit un embout buccal, un masque adulte ou un masque enfant, au choix.



## PERFORMANCES DU COUPLE AC 2000 / KIT DE NEBULISATION

Confortable et d'une très grande maniabilité, ce dispositif simple d'utilisation est apprécié pour ses performances et son efficacité dans les traitements des voies respiratoires.

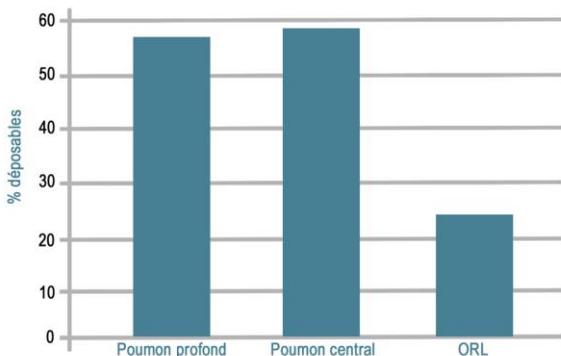

Une étude de l'ANTADIR confirme les performances suivantes :

- l'aérosol produit est caractérisé par un MMAD de  $2,9 \mu\text{m} \pm 2\%$  et 75% de particules inférieures à  $5 \mu\text{m}$ .

- à partir d'un volume de 2 ml, le dispositif AC 2000 +MICRONEB III génère  $13\% \pm 1\%$  de la charge en  $4,8 \text{ mn} \pm 0,3 \text{ mn}$ .

Ainsi, il est un des rares dispositifs à être aussi performant pour traiter les bronches que les alvéoles (voir schéma)

% de déposition par site pulmonaire, d'un aérosol généré par un compresseur AC2000 + un nébuliseur

	Code ACL	Code LPPR	Prise en charge
Compresseur AC 2000 :			Tarif de location hebdomadaire :
Location courte durée. Traitement $\leq 4$ semaines		101C03.11	9,30 €
Location longue durée :			
$\leq 64$ semaines (dès la 1ère semaine)		101C03.121	4,57 €
pendant la 2ème période au delà de 65 semaines		101C03.122	2,74 €
Nébuliseur MICRONEB III :kit enfant	436 66 37	101C03.13	12,93 € / pièce
Nébuliseur MICRONEB III :kit adulte	436 66 20	101C03.13	12,93 € / pièce
Nébuliseur MICRONEB III :kit embout buccal	436 66 43	101C03.13	12,93 € / pièce

MEDIFLUX c'est aussi :  
les Peak Flow Mini-Wright, Mini-Wright Digital,  
des chambres d'inhalation  
et des spiromètres

**VOTRE CONTACT COMMERCIAL MEDIFLUX**

**mediflux**  
Mesurer et traiter le souffle

MEDIFLUX -19 Allée des Vendanges - 77183 Croissy Beaubourg - +33 (0)1 60 93 90 60  
contact@mediflux.fr - www.mediflux.fr